

EasyVent

سبک، آسان، سریع

آمبولانس
اورژانس
آی سی یو

Portable Ventilator

ونتیلاتور پرتابل



کاربرد:

ونتیلایسیون فشار مثبت برای فراهم کردن حمایت تنفسی جهت احیای بیمار در شرایط اورژانس و همچنین تهویه کوتاه مدت بیمار یا انتقال بیماران

ماسک

لوله تراشه

لوله تراکستومی

ایزی ونت یک ونتیلاتور پرتابل پیش بیمارستانی و بیمارستانی است که با استفاده از انرژی گاز اکسیژن فشرده عمل ونتیلایسیون را انجام می دهد. این دستگاه در آمبولانسها جهت تهویه و احیای بیمار و در محیط بیمارستان جهت تهویه کوتاه مدت بیمار یا انتقال بیماران استفاده می شود.



دستگاه ونتیلاتور پرتابل

EasyVent




Daru Darman
دارو درمان پرشیا
Daru Darman Persia Co.(ltd)



EasyVent

ونتیلاتور پرتابل

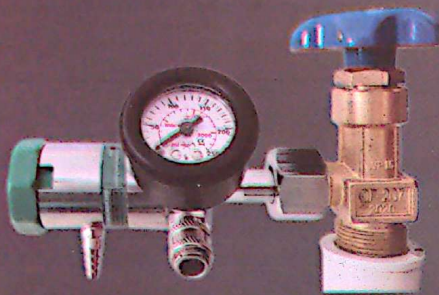

دارای دو مد کاری اتوماتیک و دستی

قابلیت تنظیم حجم (Tidal Volume) و فرکانس تنفسی (BPM) در مد اتوماتیک (Auto)

اعمال اکسیژن با فشار فلش بر روی دستگاه در مد دستی (Manual) در حال انجام (CPR)

قابلیت تریگر با بیمار، اسیست کنترل مد (SIPPV)

قابل استفاده برای اطفال و بزرگسال (۱۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم) و تعداد تنفس ۱۰ تا ۲۵

کارکرد با فشار اکسیژن (۲.۷ bar به بالا) بدون نیاز به برق و باطری

دارای دریچه اطمینان فشار (Relief Valve) $45\text{cm H}_2\text{O}$

قابلیت اتصال به سیستم سانتیترال بیمارستان یا آمبولانس

قابل اتصال به ماسک، لوله تراشه و لوله تراکستومی

قابلیت کارکرد با انواع سیلندر و اکسیژن

Parameter	EasyVent adult/child
Automatic flow rate (L/Min)	11 to 36
Automatic Tidal Volume (L)	0.15 to 1
Automatic Oxygen Concentration	100%
Automatic I:E ratio	1:2
Automatic Frequency (per minute)	10 to 25
Manual flow rate (L/Min)	40

کاربردهای ایزی ونت:

جابجایی بیمار در داخل بیمارستان

بخش اورژانس

CPR اتاق

آمبولانس و موتورلانس

ستاد بحران و امداد و پشتیبانی



تلفن: ۰۲۱-۵۴۰۶۱
فکس: ۰۲۱-۶۵۰۱۳۲۴۰

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الله، بالاتر از میدان حسینی، پلاک ۵۶، ایستگاه نوآوری شریف